

WARTNER

Wrattenpen (1,5 ml)

Enkel voor het verwijderen van wratten op handen en voeten.

LEES DE BISJLUITER AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE WARTNER[®] WRATTENPEN TE GEBRUIKEN.

Het TCA-zuur in de Wrattenpen is zeer geconcentreerd zodat deze druppel per druppel op de wrat direct aangebbracht te worden tot wanneer de volledige oppervlakte van de wrat bedekt is met een dun laagje gel. Breng de gel niet aan op de gezonde huid rond de wrat. Indien de gel toch contact maakt met de gezonde huid, reinig deze dan overvloedig met water en zeep.

A. Meer informatie over wratten
Wratten zijn onschadelijke knobbeljes op de huid die veroorzaakt worden door het "human papilloma virus" (HPV). Er bestaan verschillende soorten wratten, maar de meest voorkomende zijn de normale en voetwratten. Het zijn goedartige gezwellen die bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten en omhuld zijn met epitelweefsel. Normale wratten kunt u herkennen aan het ruwe "bloembolachtige" oppervlak. Meestal treft ze aan op handen, knieën en ellebogen. Voetwratten zijn gelijkwaardig aan normale wratten, maar treft u enkel aan op de voetzool van de onderkant van de tenen. Voetwratten zijn doorgaans platter en zijn ook vaak pijnlijk door de druk uitgeoefend tijdens het wandelen. 7 tot 10 X van de bevolking wordt geconfronteerd met wratten, vooral kinderen en adolescenten hebben er mee te maken. Wratten zijn heel besmettelijk en treden meer op als het verdedigingssysteem van het lichaam zwak is. Wratten kunnen overgedragen worden van persoon tot persoon of van de ene locatie op het lichaam naar een andere door direct contact met de besmette plek. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt na twee jaar zonder behandeling. Ze zijn echter lelijk en veroorzaken pijn in plaats van voetwratten. Daarom hebben patiënten te vaak voor wratten te behandelen in geval van te wachten tot ze vanzelf verdwijnen.

Traditioneel zijn er twee manieren om gewone wratten of voetwratten te behandelen. Enerzijds zuurpreparaten die direct op de wrat worden aangebracht en anderzijds operatieve verwijderingen door een arts die gebruikmaakt van lasertherapie, verbranding of cryotherapie (bevriezing met vloeibare stikstof). De cryotherapie methode kan ook thuis uitgevoerd worden door middel van Wartner[®] Wrattenverwijderaar Hand & Voet.

De Wartner[®] Wrattenpen is een efficiënte en gemakkelijke zuurbehandeling die u thuis kunt uitvoeren en bevat een sterk geconcentreerde gel om hand- en voetwratten te verwijderen.

EENVOUDIG GEBRUIK IN 4 STAPPEN:



STAP 1:

Stuud de pen verticaal met de transparante tip naar beneden en draai het uiteinde langzaam in wijerzin om de gel te bevrijden. Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk om het uiteinde van de pen meerdere keren voorzichtig in wijerzin te draaien tot de eerste druppel gel zichtbaar is in de transparante tip. Er dient verschillende keren rondgedraaid te worden gezien de gel zich in het bovenste gedeelte van de pen bevindt (om lekkage te vermijden).



STAP 2:

Laat de gel in de transparante tip komen tot wanneer er een druppel gevormd is.



STAP 3:

Breng de druppel gel nauwkeurig op de wrat aan (vermijd contact met de gezonde huid rond de wrat). Zorg ervoor dat de volledige oppervlakte van de wrat bedekt is met een dun laagje gel. Afhangend van de grootte van de wrat kunnen meerdere druppels nodig zijn.



STAP 4:

Laat de gel 10 tot 15 minuten drogen alvorens schoon te maken en te drogen. Breng tweemaal per dag aan gedurende 4 dagen.

WARTNER

Stylo anti-verrues (1,5 ml)

Exclusivement pour éliminer les verrues sur les mains et les pieds.

LIJRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT D'UTILISER LE STYLO ANTI-VERRUES WARTNER[®].

L'acide TCA dans le Stylo anti-verrues est très concentré, de sorte qu'il doit être appliqué goutte à goutte jusqu'à ce que la surface complète de la verrue soit recouverte d'une mince couche de gel. N'appliquez pas le gel sur la peau saine autour de la verrue. Si le gel entre malgré tout en contact avec la peau saine, rince-la abondamment à l'eau et au savon.

A. Plus d'informations sur les verrues
Les verrues sont des excroissances inoffensives de la peau causées, par le «human Papilloma Virus» (HPV). Il existe plusieurs types de verrues, mais les plus courantes sont les verrues communes et les verrues plantaires. Ce sont des excroissances bénignes formées d'un noyau de tissu conjonctif et de vaisseaux sanguins, et recouvertes de tissu épithélial. Les verrues communes sont reconnaissables à leur texture rugueuse et leur aspect en "chou-fleur". Généralement, elles apparaissent sur les mains, les genoux et les coudes. Les verrues plantaires sont similaires aux verrues communes, mais elles apparaissent uniquement sur la plante des pieds ou en dessous des ongles. En général, les verrues plantaires sont plus plates et douloureuses en raison de la pression exercée lors de la marche. 7 à 8 % de la population sont confrontés aux verrues, surtout les enfants et les adolescents. Les verrues sont très contagieuses et surviennent davantage lorsqu'une personne immunaire de l'organisme est affaibli. Les verrues peuvent être transmises d'une personne à l'autre et d'un endroit du corps à l'autre par contact direct avec le site infecté. Plus de 50% des verrues disparaissent spontanément après deux ans. Cependant, les verrues sont inesthétiques et souvent douloureuses, surtout sur la plante des pieds. C'est pourquoi les patients préfèrent souvent les traiter plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent naturellement.

Il existe traditionnellement deux manières de traiter les verrues communes et les verrues plantaires: D'une part, des préparations acides sont appliquées directement sur la verrue et, d'autre part, des ablations chirurgicales sont pratiquées par un médecin qui utilise une thérapie au laser, une cryothérapie (congélation avec de l'azote liquide) ou qui la brûle. La méthode de cryothérapie peut également être utilisée chez soi à l'aide du Stylo anti-verrues Wartner[®].

C. Wanneer mag u de Wrattenpen NIET gebruiken?
Gebruik de Wrattenpen NIET op andere lichaamsdelen dan handen en voeten.
Gebruik de Wrattenpen NIET op gevoelige huid, gezicht of lichaamsogenen.
Gebruik de Wrattenpen NIET samen met een andere wrattenbehandeling.
Gebruik de Wrattenpen NIET in geval van fibroom, moedervlekken, donkere vlekken, waterwatten (mollusca contagiosa), ouderdomswratten (verruca seborrhoica), sproeten, huidafschilfering.
Gebruik de Wrattenpen NIET bij kinderen onder de 4 jaar.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u lid aan diabetes of een andere aandoening, als u niet zeker bent of de behandeling een wrat is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u met deze behandeling start.

D. Gebruiksaanwijzingen
Wanneer de Wartner[®] Wrattenpen voor de eerste keer gebruikt wordt, is het noodzakelijk om het uiteinde van de pen meerdere keren in wijerzin te draaien tot de eerste druppel gel zichtbaar is in de transparante tip. Er dient verschillende keren rondgedraaid te worden gezien de gel zich in het bovenste gedeelte van de pen bevindt (om lekkage te vermijden). Bij volgende applicaties dient er voorzichtig gedraaid te worden tot er een druppel gevormd is zodat deze nauwkeurig op de wrat kan aangebracht worden. Als er per ongeluk een te grote druppel gel is vrijgekomen en in contact gemaakt wordt met de gezonde huid rond de wrat, reinig dan de volledige zone overvloedig met water en zeep. Breng daarna de juiste dosis TCA-gel op de wrat aan.

E. Verwachtingsresultaat



Vóór de behandeling
Normale wratten bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten en zijn omhuld met epitelweefsel.



Tijdens de behandeling
De doede huid zal vervellen en de huid kan dikkter en donkerbruin kleuren door het bloed dat nog aanwezig is onder de wrat. Dit is een normaal gevolg van het afbreken van de huid onder invloed van de TCA-gel en wijst op het positieve genezingsproces van de wrat. Dit kan enkele weken duren.



Na de behandeling
De wrat zal verdwijnen en oudere huidlagen zullen geleidelijk aan vervangen worden door nieuwe gezonde huid. Het kan enkele weken duren vooraleer de huid volledig hersteld is.

F. Let op

Trichloroazijnzuur (TCA) is een sterk bijend zuur. Breng de gel direct op de wrat aan en niet op de gezonde huid eromd, gezien dit bijzend kan zijn. Extreme voorzichtigheid is aangehouden, zeker wanneer de Wrattenpen gebruikt wordt op gevoelige kindhuid.

- Om de gezonde huid te beschermen, han er rond de wrat een gewone vette crème aangebracht worden.
- Uitsluitend voor uwendig gebruik.
- Als er per ongeluk een te grote druppel gel is vrijgekomen en er contact gemaakt wordt met de gezonde huid rond de wrat, reinig dan de volledige zone overvloedig met water en zeep. Breng daarna de juiste dosis TCA-gel op de wrat aan.
- Zorg ervoor dat de TCA-gel niet terechtkomt op kleding, jwelen, stoffen of meubels aangezien dit beschadiging kan veroorzaken.
- Als de behandelde zone zwel, rood of pijnlijk wordt, reinig dan overvloedig met water en zeep en raadpleeg uw arts of apotheker.
- Indien deze instructies niet nauwgezegd gevolgd worden, kunnen huidirritatie, pijn en brandwonden voorkomen.

- Indien u rootheid of irritatie opmerkt na één of meerdere applicaties, stop onmiddellijk de behandeling.
- Een te grote hoeveelheid gel kan irritatie veroorzaken.
- Gebruik de gel niet op geïrriteerde, gefinfecteerde of rode huid of op huid die een tehen van zonsbrandveront, zoals jeuk of zwelling.
- Wees extra zorgvuldig wanneer u de TCA-gel aanbrengt op dunne of droge huid.
- Toezicht door een volwassene is nodig, wanneer de behandeling uitgevoerd wordt bij kinderen.

- Raadpleeg uw arts als de wrat na 4 behandelingsronden nog niet verdwenen is.
- Raadpleeg uw arts als u niet zeker bent of de behandeling een wrat is.
- Er is geen interactie met geneesmiddelen behand. Er zijn geen behandelingsaanwijzingen voor gebruik van de Wrattenpen.
- Om hygiënische redenen mag het product slechts door één persoon gebruikt worden. Het product mag niet door meerdere personen hergebruikt worden en het is beter de applicator weg te gooien vóór de vervaldatum als hij gebruikt werd voor meerdere wratten (na einde van de behandeling).

G. Bijwerkingen

- Het is belangrijk dat u het product exact volgens de instructies gebruikt omdat te lange blootstelling aan de gel kan leiden tot een tijdelijk brandend gevoel, tijdelijke pijn, tijdelijke lichte zweervorming of tijdelijke hyper- of hypopigmentatie.
- Het is mogelijk dat de huid na de applicatie tijdelijk donker wordt.
- De behandelde zone dient beschermd te worden tegen direct zonlicht, aangezien hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen.

H. Bewaring

Op een veilige, droge en donkere plaats bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaren. Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Na gebruik het dopje weer op de pen zetten. Zodra de volledige behandelingsloop is, de borselset goed met een doekje reinigen alvorens de pen te bewaren.

Ingrediënt

Trichloroazijnzuur

Medical Brands
Piet Heinbade 199, IOI9 HC Amsterdam, NL
Verdeler: Omega Pharma Belgium NV,
Venecoweg 26, BE-9810 Nazareth
Voor meer informatie: wartner.com

Datum van laatste herziening bisjluiter: februari 2013 V06 LF00589A

druk of wrijving op de behandelde zone. Om dit te verminderen kunt u gebruikmaken van comfortpleisters die vrij te rooip zijn.

Voor meer informatie: wartner.com

BELEANGRIJK

Als de wrat heel klein is, breng slechts eenmaal per dag een kleine druppel gel aan.

De TCA-gel in de Wartner[®] Wrattenpen is zeer geconcentreerd. Gebruikt voor elke applicatie enkel de hoeveelheid die nodig is om het oppervlak van de wrat met een dun laagje te bedekken.

Reinig de tip met een doekje na behandeling alvorens te bewaren.

Breng de gel niet aan op de gezonde huid rond de wrat.

Mag enkel gebruikt worden voor hand- en voetwratten.

Om wonden te voorkomen, adviseren wij een goede hygiëne van de behandelde zone.

CE 0086



Pendant le traitement
La peau morte va se desquamer, et la peau peut devenir plus épaisse et prendre une teinte brun foncé en raison du sang encore présent sous la verrue. C'est une conséquence normale de la nécrose de la peau sous l'influence du gel TCA et indique le processus de guérison positif de la verrue. Cela peut prendre quelques semaines.



Après le traitement
La verrue va disparaître et les couches de peau ancienne seront remplacées graduellement par une peau neuve et saine. Cela peut prendre quelques semaines avant que la peau ne soit complètement rétablie.

F. Faites attention

- L'acide trichloroacétique (TCA) est un acide très corrosif. Appliquez le gel directement sur la verrue et non sur la peau saine qu'il entoure, car il pourrait la brûler. Une prudence extrême est de mise, surtout lorsque le Stylo anti-verrues est utilisé sur une peau d'enfant sensible.
- Afin de protéger la peau saine, vous pouvez appliquer autour de la verrue une crème grasse courante.
- Pour usage externe uniquement.
- Si une goutte trop grosse de gel s'est formée par accident et qu'elle entre en contact avec la peau saine autour de la verrue, nettoyez toute la zone abondamment avec de l'eau et du savon. Appliquez ensuite la dose corrigée de gel TCA sur la verrue.
- Veillez à ce que le gel TCA n'entre pas en contact avec des vêtements, des bijoux, des tissus ou des brûlures de la peau.
- Si la zone traitée gonfle et devient rouge ou douloureuse, nettoyez-la abondamment avec de l'eau et du savon et consultez votre médecin ou pharmacien.
- Le non respect de ces précautions d'emploi peut entraîner des douleurs, des irritations et/ou des brûlures de la peau.
- Si des rougeurs ou des irritations apparaissent après une ou plusieurs applications, arrêtez immédiatement le traitement et consultez.
- Un surdosage peut causer des irritations.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, infectée, rouge ou ayant des signes d'inflammation tels que des démangeaisons ou un gonflement.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous appliquez le gel TCA sur une peau mince ou sèche.


- Lorsque le traitement est appliqué chez des enfants, il doit se faire sous le contrôle d'un adulte.
- Dans le cas où après 4 traitements, la verrue ne disparaît pas, consultez votre médecin.
- En cas de doute concernant le diagnostic de la présence d'une verrue, consultez votre médecin.

- Aucune interaction avec des médicaments n'est connue. Aucune contre-indication n'est connue pour l'utilisation du Stylo anti-verrues.
- Pour des raisons d'hygiène, le produit ne doit être utilisé que par un seul utilisateur. Ne pas réutiliser le même dispositif sur une autre personne. Il est préférable de jeter l'applicateur avant la date de péremption s'il a été utilisé pour le traitement de verrues multiples (après la fin du traitement).

G. Effets indésirables

- Il est important d'utiliser le produit conformément aux recommandations car le surdosage peut causer une sensation de brûlure temporaire, une douleur passagère, une légère irritation ou une hyperpigmentation ou hypopigmentation temporaires.
- Le produit peut devenir temporairement foncé après l'application.

UTILISATION SIMPLE EN 4 ETAPES

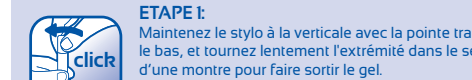

ETAPE 1:

Maintenez le stylo à la verticale avec la pointe transparente vers le bas, et tournez légèrement l'extrémité dans les sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir le gel. Lorsque vous utilisez le Stylo anti-verrues Wartner[®] pour la première fois, il est indispensable de tourner l'embout plusieurs fois dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la première goutte apparaisse dans la pointe transparente. Il faut tourner plusieurs fois car le gel se trouve dans la partie supérieure du stylo (afin d'éviter les fuites).



ETAPE 2:

Laissez le gel arriver dans la pointe transparente jusqu'à ce qu'une goutte se soit formée.



ETAPE 3:

Appliquez précisément la goutte sur la verrue (évitiez le contact avec la peau saine autour de la verrue). Veillez à ce que toute la surface de la verrue soit recouverte d'une couche mince de gel. Suivant la taille de la verrue, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs gouttes.



ETAPE 4:

Laissez le gel sécher pendant 10-15 minutes avant d'enfiler des chaussures. Appliquez 2 fois par jour pendant 4 jours.

WARTNER

Stift gegen Warzen (1,5 ml)

Ausschließlich zur Entfernung von Warzen an Händen und Füßen.

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DEN WARTNER[®] STIFT GEGEN WARZEN ANWENDEN.

Die Trichloroazidure in Ihrem Stift gegen Warzen ist hochkonzentriert und muss Topfen für Topfen auf die Warze aufgetragen werden, bis die Warzenoberfläche vollständig mit einer dünnen Schicht Gel bedeckt ist. Geben Sie das Gel nicht auf die angrenzende gesunde Haut. Sollte das Geldermoch mit dem Gesunden Haut in Berührung geraten, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife.

A. Hintergrundinformationen zu Warzen
Warzen sind harmlose Hautwucherungen, die von Human-papillomaviren (HPV) verursacht werden. Es gibt eine Vielzahl von Warzenarten, aber die gängigsten sind gewöhnliche Warzen und Dorwarsen. Es sind geringe Geschwüre, die aus einem Kern von Bindegewebe mit Blutzellen bestehen und umhüllt sind von Epithelgewebe.

Gewöhnliche Warzen können an ihrer „blumenbolähnlichen“ Oberfläche erkannt werden. Sie treten normalerweise an Händen und Füßen, aber auch Knieen und Ellbogen auf.

Dorwarsen sind ähnlich den gewöhnlichen Warzen, treten aber nur an Drüsenlöchern unter den Füßen (Ferse, Fußballen oder Zehen) auf. Dorwarsen haben eine flache, glatte Oberfläche, sind oft von Hornhaut und Schwielen bedeckt und wachsen dortmang in die Tiefe, daher können Sie beim Gehen starke Schmerzen verursachen. 7-10 % der Gesamtbevölkerung sind in ihrem Leben mindestens einmal von Warzen betroffen, besonders Kinder und Jugendliche. Warzen sind äußerst ansteckend und treten umso häufiger auf, je schwächer das Immunsystem ist. Sie können sich durch Berührung oder Kontakt mit Haut bzw. Hautschüppchen von einer Person zur nächsten verbreiten oder auch von einem Körperteil auf ein anderes ausbreiten. Mehr als 50% aller Warzen verschwinden innerhalb von 2 Jahren ohne Behandlung. Wie dem auch sei, Warzen sind unansehnlich und können im Fall von Dorwarsen sogar Schmerzen verursachen. Daher entscheiden sich Betroffene oft dafür, etwas gegen ihre Warzen zu tun anstatt abzuwarten, bis sie eventuell von selbst verschwinden. Warzen werden traditionell hauptsächlich auf zwei Arten behandelt: Mit flüssigen Säure-Tinkturen, welche dreht auf die Warze aufgetragen werden, oder durch eine Behandlung beim Arzt in Form von Laser, Ausbrennen, Vereisung (oft mit Flüssigstickstoff) oder gar einem chirurgischen Eingriff. Die Kryotherapie methode kann mithilfe des Wartner[®] Warzenentferners für Hand & Fuß auch zu Hause durchgeführt werden. Der Wartner[®] Stift gegen Warzen ist eine wirtsame und einfach anzuwendende Alternative für zuhause und beinhaltet ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von Warzen.

B. Was ist der Wartner[®] Stift gegen Warzen und wie funktioniert er?
Der Wartner[®] Stift gegen Warzen ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen (verruca vulgaris) und Dorwarsen (verruca plantaris) an Händen und Füßen. Der Stift enthält ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von Warzen. Dieses TCA-Gel (Trichloroazidure) bewirkt ein chemisches Peeling der Haut und stimuliert die Zellerneuerung, wodurch sich die Haut abschält. Auf diese Weise bildet sich neue gesunde Haut, die Warze schrumpft und verschwindet schließlich.

EINFACHE ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN



SCHRITT 1:

Halten Sie den Stift vertikal mit der durchsichtigen Spitze nach unten, und drehen Sie das Stifende langsam im Uhrzeigersinn, um das Gel zu lösen. Beim ersten Gebrauch des Wartner[®]-Stifts gegen Warzen muss das Stifende des Stifts mehrmals im Uhrzeigersinn gedreht werden und zwar so lange, bis der erste Tropfen Gel in der durchsichtigen Spitze zu sehen ist. Dazu sind meist mehrere vollständige Drehungen notwendig. Das liegt daran, dass das Gel am anderen Ende des Stiftes „eingelagert“ ist, um ein Auslaufen vor der ersten Anwendung zu verhindern.



SCHRITT 2:

Lassen Sie das Gel in die durchsichtige Spitze fließen, bis sich dort ein Tropfen gebildet hat.



SCHRITT 3:

Bringen Sie den Tropfen Gel exakt auf die Warze auf (dabei Kontakt mit der umgebenden gesunden Haut vermeiden). Sorgen Sie dafür, dass die gesamte Oberfläche der Warze mit einer dünnen Schicht Gel bedeckt ist. Je nach Größe der Warze können mehrere Tropfen notwendig sein.



SCHRITT 4:

Lassen Sie das Gel 10-15 Minuten trocknen, bevor Sie Schuhe anziehen. Wenn Sie den Wartner[®] Stift gegen Warzen zweimal täglich über einen Zeitraum von 4 Tagen an.

- La peau traitée ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, pour éviter toute hypo- ou hyperpigmentation.

H. Conservation

Conservez dans un endroit sûr, sec et sombre, à température ambiante (15-25 °C). Tenir hors de portée de la vue des enfants. Après utilisation: retirez le capuchon sur le stylo. Une fois le traitement terminé, nettoyez soigneusement la pointe du stylo avec un tissu avant de le remettre.

Ingredient

Acide trichloroacétique

Après quatre jours de traitement, la peau va se desquamer au cours des quatre jours suivants. Vous pouvez enlever délicatement la verrue morte sous l'eau tiède. Après le traitement, il se formera une peau neuve. Dans le cas où la verrue ne disparaît pas complètement, répétez le traitement après une période de 4 jours d'arrêt. Possibilité de renouveler le traitement jusqu'à 4 fois.

La verrue peut disparaître dès la première semaine de traitement. Après quelques jours, sa surface peut prendre une teinte foncée. C'est une phase normale du processus de guérison. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que la peau ne soit totalement rétablie.

Si la verrue est très petite, appliquez seulement une fois par jour une petite goutte sur le sommet de la verrue.

Au cas où une verrue plantaire est recouverte d'un cal, il est recommandé de tremper le pied pendant 5 minutes dans de l'eau chaude. Vous pouvez ensuite utiliser une petite lime pour éliminer le cal sur la verrue avant de commencer le traitement. Après l'application et le séchage du gel TCA, vous pouvez resserrer de

Medical Brands
Piet Heinbade 199, IOI9 HC Amsterdam, NL
Distributeur: Omega Pharma Belgium NV,
Venecoweg 26, BE-9810 Nazareth
Pour plus d'informations: wartner.com

Dernière révision de la notice: février 2013 V06 LF00589A

l'incommodité lors d'une légère pression ou d'un frottement sur la zone traitée. Pour réduire cette sensation, vous pouvez utiliser des pansements confort qui sont en vente libre.
Pour plus d'informations: wartner.com

IMPORTANT

- Si la verrue est très petite, appliquez seulement une fois par jour une petite goutte.
- Le gel TCA dans le Stylo anti-verrues Wartner[®] est très concentré. Pour chaque application, utilisez uniquement la quantité nécessaire pour recouvrir la surface de la verrue d'une couche mince.
- Pour la conservation, il faut, après le traitement, nettoyer la pointe avec un chiffon.
- Ne pas appliquer sur la peau saine entourant la verrue.
- Peut être utilisé uniquement sur les verrues (au niveau des mains et des pieds).
- Pour éviter toutes complications, il est conseillé de maintenir une bonne hygiène de la partie traitée.

CE 0086

C. Wann dürfen Sie den Stift gegen Warzen NICHT anwenden?

- Benutzen Sie den Stift gegen Warzen NICHT auf sensible Haut, im Gesicht oder an Geschlechtsorganen.
- Benutzen Sie den Stift gegen Warzen NICHT auf Fibromen, Muttermalen, dunklen Flecken, Dellwarzen (Mollusca contagiosa), Alterswarzen (Verruca seborrhoica), Sommerprossen, Hautschuppen.
- Benutzen Sie den Stift gegen Warzen NICHT bei Kindern unter 4 Jahren.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenn Sie an einer Hauterkrankung oder an Diabetes leiden oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei der Hauterkrankung um eine Warze handelt, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker am Rat, bevor Sie mit dieser Behandlung beginnen.

D. Anwendung

Beim ersten Gebrauch des Wartner[®]-Stifts gegen Warzen muss das Stifende im Uhrzeigersinn gedreht werden und zwei so lange, bis der erste Tropfen Gel in der durchsichtigen Spitze sichtbar ist. Dazu sind meist mehrere vollständige Drehungen notwendig. Das liegt daran, dass das Gel am anderen Ende des Stiftes „eingelagert“ ist, um ein Auslaufen vor der ersten Anwendung zu verhindern. Bei den folgenden Anwendungen sollte das Drehen sehr vorsichtig erfolgen und so lange, bis sich ein Tropfen gel gebildet hat, den Sie auf die Warze auftragen werden kann. Wenn sich versehentlich ein zu großer Tropfen Gel löst und auf die gesunde Haut neben der Warze gelangt, reinigen Sie den gesamten Bereich gründlich mit Wasser und Seife. Anschließend tragen Sie die korrekte Menge TCA-Gel auf die Warze auf.

E. Erwartetes Resultat

Die abgestorbenen Hautpartikel schälen sich ab, und aufgrund des noch unter der durchsichtigen Bluts kann die Haut dicker werden und sich dunkelbraun färben. Dies ist eine normale Folge des Absterbens der Haut durch die Wirkung des TCA-Gels und ein Anzeichen für den positiven Verlauf des Heilungsprozesses. Dieser kann einige Wochen dauern.

Die abgestorbenen Hautpartikel schälen sich ab, und aufgrund des noch unter der durchsichtigen Bluts kann die Haut dicker werden und sich dunkelbraun färben. Dies ist eine normale Folge des Absterbens der Haut durch die Wirkung des TCA-Gels und ein Anzeichen für den positiven Verlauf des Heilungsprozesses. Dieser kann einige Wochen dauern.

Die Warze verschwindet und die älteren Hautschichten werden nach und nach durch neue, gesunde Haut ersetzt. Es kann mehrere Wochen dauern, bis die Haut wieder vollständig geheilt ist.

F. Bitte beachten Sie
- Trichloroazidure (TCA) ist eine stark ätzende Säure. Das Gel eine ätzende Wirkung hat, wenn es auf gesunde Haut aufgetragen wird. Falls die Warze noch nicht vollständig entfernt wurde, kann die Behandlung nach der Anwendungspause von 4 Tagen wiederholt werden. Insgesamt darf eine Warze bis zu maximal 4-mal behandelt werden.
Die Warze kann schon ab der ersten Woche verschwinden. Nach einigen Tagen könnte sich die Oberfläche eventuell dunkel verfärben. Das ist ein normaler Vorgang und Teil des Heilungsprozesses. Es kann mehrere Wochen dauern, bis die Haut wieder vollständig geheilt ist.
Ist die Warze sehr klein, tragen Sie nur einmal am Tag einen kleinen Tropfen Gel auf die Spitze der Warze auf. Wenn eine Fußwarze mit Hornhaut bedeckt ist, wird empfohlen, den Fuß 5 Minuten lang in warmem Wasser einzuweichen. Danach kann eine kleine Feile verwendet werden, um die Hornhaut von der Warze zu entfernen, bevor mit der Behandlung begonnen wird. Nachdem das TCA-Gel aufgetragen wurde und

- Zum Schutz der gesunden Haut kann um die Warze herum eine normale Fettsäure aufgetragen werden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

- Wenn sich versehentlich ein zu großer Tropfen Gel gelöst hat und auf die gesunde Haut neben der Warze gelangt ist, reinigen Sie den gesamten Bereich gründlich mit Wasser und Seife. Anschließend tragen Sie die korrekte Menge TCA-Gel auf die Warze auf.
- Sorgen Sie dafür, dass das TCA-Gel nicht auf Kleidung, Schmutz, Stoffe oder Möbel gelangt, da dies zu Beschädigungen führen könnte.
- Sollte die behandelte Oberfläche bräunlich, rot werden oder schmerzen, reinigen Sie ihn sorgfältig mit Wasser und Seife, und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
- Falls Sie sich nicht an diese Gebrauchsanweisung halten, kann dies zu Hautreizungen, Brennen und Schmerzen führen.

- Falls die behandelte Stelle anschwillt, sich rot verfärbt oder gereizt wirkt, beenden Sie die Anwendung umgehend.
- Übermäßige Anwendung des Gels kann zu Hautreizungen führen.

- Nicht auf gereizter, infizierter oder größerer Haut und nicht bei Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen anwenden.

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das TCA-Gel auf dünne oder trockene Haut auftragen.
- Wenn die Behandlung bei Kindern durchgeführt wird, ist Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

- Falls die Warze nach 4 Anwendungsterminen noch nicht erfolgreich entfernt werden sollte, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Es sind keine Wechselwirkungen mit Medikamenten bekannt. Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen bei der Anwendung des Stifts gegen Warzen.

- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer einzigen und nicht von mehreren Personen gleichzeitig verwendet werden.

- Warzen angewendet werden ist, sollte das Produkt nach Abschluss der Behandlung aus hygienischen Gründen auch vor Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden.

G. Nebenwirkungen
Bei Anwendung des Produkts erfolgt die Gebrauchsanweisung entsprechend angewendet wird, da ein unmittelbarer Kontakt mit der Formulierung vorübergehend zu einem stechenden, brennenden Gefühl, Schmerz, leichter Entzündung sowie Hautverfärbungen führen kann.

- Die Haut kann sich nach der Anwendung kurzzeitig dunkel verfärben.
- Die behandelte Stelle sollte vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen geschützt werden, da dies zu einer Hyper- bzw.