

WARTNER®

Nova izboljšana formula

(SI) Za odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalu

Zamrzne bradavice do jedra


PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO

A. Kaj so bradavice

Bradavice so nenevarne kožne spremembe, ki jih povzroča humani papiloma virus (HPV). Poznamo več vrst bradavic, vendar so najpogostejše navadne bradavice in bradavice na stopalu. Sestavljata jih jedro vezivnega tkiva, ki ga prehranjuje krvne žile, prekrite s plastmi epitelja.

Navadne bradavice prepoznamo po grobi, cvetači podobni površini. Najpogostejše so na rokah, koljenih in komolcih.

Bradavice na stopalu so podobne navadnim bradavicam, vendar se pojavljajo le na podplatih, peti in spodnjem delu prstov. Bradavice na stopalu so po navadi bolj ploščate kot navadne ter boleče zaradi pritiska pri hoji. Wartner® je posebno oblikovan za odstranjevanje bradavic na stopalu, saj vključuje dva dodatna koraka za pripravo in kot zaščita po odstranjevanju.

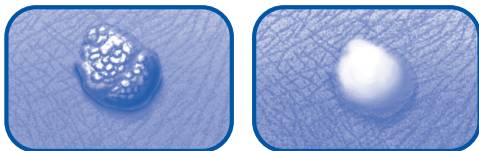

Bradavice prizadenejo od 7 do 10 odstotkov prebivalstva. Najpogostejše so pri otrocih in najstnikih. Zelo so nalezljive in se pogosteje razvijajo, ko je obrambna sposobnost organizma slabšaja. Lahko se prenašajo z ene osebe na drugo oziroma z enega dela telesa na drugi pri isti osebi z neposrednim stikom okuženega mesta. Več kot 50 odstotkov bradavic bo izginito v dveh letih brez odstranjevanja, vendar pa se mnogi odločijo za odstranjevanje, ker jih motijo oziroma bolijo.

Poznamo dva tradicionalna načina odstranjevanja bradavic. Prvi je s preparati na osnovi kislin, ki jih nanesemo neposredno na bradavico. Drugi pa je kirurška odstranitev, ki jo izvede zdravstveni delavec lasersko, z žganjem ali zamrzovanjem s tekočim dušikom. Wartner® je učinkovito in enostavno sredstvo za domačo uporabo, ki temelji na metodi zamrzovanja. Če želite odstraniti bradavico, ki je večja od 7,5 mm, se posvetujte s svojim zdravnikom.

B. Kako deluje Wartner®

Wartner® odstranjuje bradavice do jedra, z metodo zamrzovanja, preizkušeno pri zdravnikih:

- Wartner® takoj zamrzne bradavico vse do jedra. Ko penasti nastavek pritisnemo na bradavico, koža postane bela, kot posledica zamrzovanja pa se lahko pojavi blag občutek bolečine oziroma pikanja. Običajna barva kože se bo povrnila, ko boste odstavili penasti nastavek. Občutek bolečine oziroma pikanja bo hitro ponehal in izginito v nekaj urah.
- Ko se zamrznjeno področje ogreje, lahko postane rdeče. Pod bradavico se v nekaj dneh oblikuje neviden mehur. Obravnavana bradavica postopno izgine ali odpade v 10-14 dneh, pod njo pa se oblikuje nova zdrava koža.



C. Neželeni učinki

- Tako kot pri vseh metodah zamrzovanja koža začasno postane bela.
- Pomembno je, da uporabljate izdelek skladno z navodili za uporabo. Neprevidno ravnanje lahko povzroči pregloboko zamrzitev in poškoduje zgornje plasti kože, kar se kaže v brazgotinah in/ali poškodbah žvečev.
- Če je zamrzovanje izpostavljeno zdravilo tkivo na prstih nog ali rok (to se lahko zgodi, če držite penasti nastavek na bradavici dlje, kot je predpisano), lahko pride do lokalnega odtirja tkiva.
- Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo večji mehurji, kar je lahko boleče.
- Ko bradavica odpade, lahko pride do depigmentacije (razbarvanja kože) ali nastanka manjše brazgotine.
- Uporaba Wartnerja® lahko povzroči manjše opekline zaradi nizke temperature zamrzovanja izdelka, vendar so taki primeri zelo redki.
- Zelo pomembno je, da Wartner® uporabljate v skladu z navodili za uporabo in s tem zmanjšate možnost nastanka neželenih učinkov (glejte navodila za uporabo).

D. Opozorilo: Kdaj ne smete uporabljati Wartnerja®

Če niste 100-odstotno prepričani, da je izrastek na koži bradavica, se pred uporabo Wartnerja® posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek smejo uporabljati le odrasli. Ne uporabljajte pri otrocih pred dopolnjenim 4. letom starosti. Ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite. Ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen, ker se zamrznjeno področje morda ne bo zacelilo enako hitro in popolno. Ljudje s slabo prekrvavitvijo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom. Wartnerja® ne smete uporabljati na tanki ali občutljivi koži, npr. na obrazu, vratu, pod pazduho, na prsih, zadnjici ali splovljih. Ne uporabljajte na razdrznjeni koži ali na koži, ki je okužena, pordela ali kaže kakršne koli znake vnetja, ki je srbenje ali otekanje. Ne smete ga uporabljati na bradavicah, iz katerih izrašajo dlake, na znamenjih, temno obarvanih znamenjih, pigmentiranih koži ali na delih kože, ki so nenavadnega videza.

E. Opozorilo

- Če dvomite, da je izrastek na koži bradavica, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Primerno samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte ali vdihajte, uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.
- Takoj po uporabi si umijte roke (razen obravnavega področja).
- Wartner® uporabljajte samo s priloženimi posebnimi penastimi nastavi.
- Za vsako bradavico uporabite nov penasti nastavek; en penasti nastavek je za enkratno uporabo.
- Če imate bradavico na vrhu roke/stopala, med odstranjevanjem počasi premikajte prste na roki ali nogi.
- Izogibajte se stiku z zdravo kožo okoli bradavice, ki jo odstranjujete.
- Penastega nastavka ne pritiskajte premočno na bradavico.
- Ne dotikajte se področja okoli bradavice.
- Penasti nastavek držite na bradavici največ 20 sekund (navadna bradavica) ali 40 sekund (bradavica na stopalu) ali manj, če bradavica in koža okoli nje postateta beli.
- Če imate več bradavic zelo blizu skupaj, posebej na prstih rok ali nog, zdravite samo eno naenkrat. Vsako preostalo odstranjujete ločeno z 2- tedenskimi intervali med odstranjevanji.
- Stare in velike bradavice je težko odstraniti. Pogosto je potrebno več kot eno odstranjevanje z Wartnerjem®.
- Če je potrebno več kot eno odstranjevanje, ponovite obravnavo po dveh tednih. Ne obravnavajte iste bradavice več kot trikrat. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če tri uporabe niso prinesle izboljšanja.
- Rok uporabnosti in serijska številka sta odčitljivi na skatlci in dnu aerosolnega pršilnika.

- Wartner® vsebuje zelo vnetljive sestavine. Izdelek uporabljajte v dobro prezračenih prostorih, najmanj 1 m od odprtega ognja, vročine, neposredne sončne svetlobe, elektrostatskih in električnih virov, vključno z lučmi. Med uporabo Wartnerja® ne kadite in ne imejte v bližini prižgane cigarete. Med uporabo ga ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C (npr. električna luč). Priporočamo, da pršilnik držite v pokončnem položaju, prosto in stran od telesa ter ga ne pritiskate ob trdno podlago.
- Ne luknjajte ali sežigate embalaže, tudi ko je prazna.
- Hranite na varnem in nedosegljivo otrokom.

F. Eno pakiranje Wartner® vsebuje:

- plinški pršilnik z mešanico dimetiletra in propane, ki je neškodljiva za okolje, CE 0344
- plastični ključ za večkratno uporabo za namestitve penastih nastavkov
- 12 penastih nastavkov za 12 odstranjevanj bradavic z Wartnerjem®
- pilico za večkratno uporabo, CE
- navodilo za uporabo z natančnimi informacijami o bradavicah, izdelku Wartner®, načinu delovanja in njegovi uporabi za učinkovito odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalu

G. Navodilo za uporabo

Pred uporabo izdelka Wartner® preberite celotno navodilo za uporabo.

Od 10 do 14 dni po obravnavi z Wartnerjem® bradavice običajno izginejo. Stare in velike bradavice pogosto potrebujejo več kot eno odstranjevanje z Wartnerjem®. Če 14 dni po odstranjevanju bradavica ali njen del še vedno ostane, jo lahko varno ponovno odstranjujemo z Wartnerjem®. Vsk penasti nastavek uporabimo le enkrat, potem ga zavrzemo. Če tri uporabe niso prinesle izboljšanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

H. Po odstranjevanju

- Površino, na kateri ste odstranjevali bradavice, ohranite čisto.
- Dovoljeno je plavanje in tuširanje.
- Površino, kjer je bila bradavica, ne praskajte ali prebadajte.
- Zavarujte mehurje, če je potrebno z obližem, ter jih ne prebadajte.
- Posvetujte se z zdravnikom, če boleci ali pikajoči občutki ne minejo ali če se pojavi kateri drug zaplet.



Uvoznik:
Adriatic B5T d.o.o.
Verovškova 55
1000 Ljubljana
Slovenija
www.wartner.si
info@adriaticb5t.com

Datum zadnje revizije besedila: september 2011

1616A
59-34093-3000

UPORABA V 3 KORAKIH ZA ODSTRANJEVANJE NAVADNIH BRADAVIC IN BRADAVIC NA STOPALU

1. KORAK

Modri del penastega nastavka primemo s palcem in kazalcem ter stisnemo, da se pojavi majhna odprtina. Odprtino penastega nastavka namestimo na palčasti del plastičnega ključa tako, da palčasti del ne bo več viden.



2. KORAK

Pršilnik držimo v pokončnem položaju, prosto in stran od telesa, odprtega ognja, vročine, neposredne sončne svetlobe, elektrostatskih in električnih virov. Plastični ključ s penastim nastavkom namestimo v odprtino na vrhu pokrova plinskega pršilnika tako, da se nastavek ne bo več videl. Ploščevinko z eno roko čvrsto držimo pri dnu in z drugo močno pritisnemo plastični ključ za 3 sekunde (štetje od 21 do 23). Med pritiskanjem slišimo sikajoči zvok. Iz odprtine odstranimo plastični ključ s penastim nastavkom, ki je prepojen s hladno tekočino. Nastal bo kondenz, ki je neškodljiv.



3. KORAK

Takoj ko iz odprtine odstranimo plastični ključ, počakamo 20 sekund, da se penasti nastavek še dodatno ohladi. 5 tem se poveča učinkovitost Wartnerja®.



4. KORAK

Po 20 sekundah potisnite aplikator s penastim nastavkom nežno na bradavico.

- Za navadne bradavice držite 20 sekund.
- Za bradavice na stopalu držite 40 sekund.



Zagotoviti moramo stalen stik z bradavico, ki jo nameravamo zamrzniti. Penasti nastavek držimo na površini bradavice toliko časa, kot je priporočeno. Občutili bomo kratkotrajno pikanje in bolečino, ki je posledica zamrzovanja. Potem ko bomo odstranili bradavico, počakamo dve minuti, preden s papirnati robcem odstranimo penasti nastavek s plastičnega ključa. Po enkratni uporabi zavrzite penasti nastavek. Penastega nastavka ne uporabljate ponovno in se ne dotikajte njegove konice z golimi rokami, da preprečite ponovno okužbo z virusom bradavic.

DODATNA KORAKA V PRIMERU BRADAVICE NA STOPALU za optimalno pripravo in kot zaščita po uporabi

PRED UPORABO

Stopala najprej namakajte 5 minut v topli vodi. Nato previdno s pilico odstranite poroženo kožo, da izpostavite bradavico na stopalu.



KORAKI OD 1 DO 4

Enako kot pri odstranjevanju navadnih bradavic.

5. KORAK

Ko držite aplikator na bradavici 40 sekund, lahko občutite nelagodje ob pritisku na tretirano območje. Lahko si pomagajte tako, da občutljivo območje zaščitite s penastim obližem, ki ga kupite v trgovini. Penasti obliži niso priloženi.

